


FABRICANT  
FRANÇAIS  
D'IMPLANTS



**Poly Implants Prothèses**

• Bruxelles • 83507 La Seyne-sur-Mer cedex • FRANCE • Tél. 33 (0)4 94 10 98 10 • Fax 33 (0)4 94 10 98 11 • Site web : [www.pipfrance.fr](http://www.pipfrance.fr) • E-mail : [pipfrance@wanadoo.fr](mailto:pipfrance@wanadoo.fr)

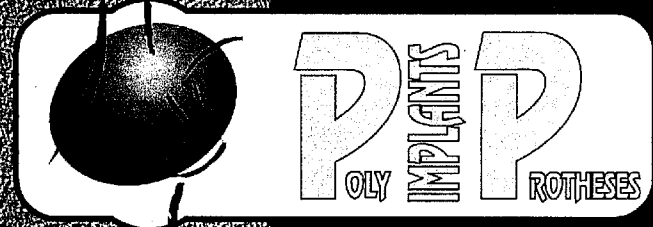

Système de traitement de l'air  
Air treatment system



Salle de trempage : comptage particulaire  
Dipping room : particles counting



Phase texture  
Texturing step



Phase collage pastille d'occlusion  
Patch gluing step



Phase remplissage  
Filling step



Contrôle qualité  
Quality control

quelques semaines.

Après la détection et

l'analyse de la

pollution, les

travaux de


restauration

ont commencé.


Les travaux de

restauration

ont commencé.

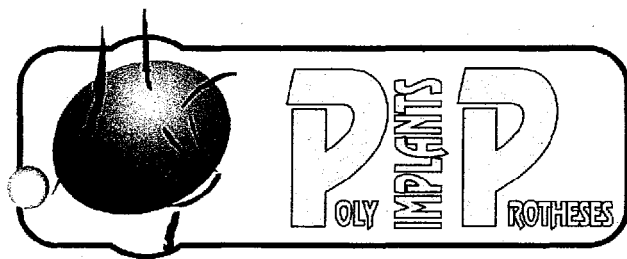

## Prefilled high cohesivity gel mammary implant high profile (smooth / or textured)

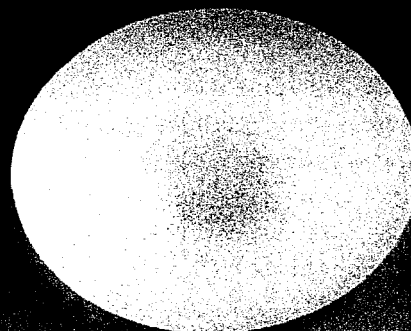

CE0197

The prefilled high cohesivity silicon gel implant gives up to now the best aesthetic results, patient comfort and implant longevity.

The various articles published since 1987 show that the texture of the implant reduces quite noticeably the "capsules" percentage.

Sterilization : ethylene oxyde

### HIGH PROFILE : usual volumes

| Total volume<br>(cc) | Diameter<br>(mm) | Projection<br>(mm) | Smooth Reference <sup>(1)</sup> | Textured Reference |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| 90                   | 80               | 29                 | IMGHC-LS-H-090                  | IMGHC-TX-H-090     |
| 130                  | 84               | 32                 | IMGHC-LS-H-130                  | IMGHC-TX-H-130     |
| 150                  | 90               | 34                 | IMGHC-LS-H-150                  | IMGHC-TX-H-150     |
| 170                  | 94               | 35                 | IMGHC-LS-H-170                  | IMGHC-TX-H-170     |
| 190                  | 98               | 36                 | IMGHC-LS-H-190                  | IMGHC-TX-H-190     |
| 210                  | 102              | 37                 | IMGHC-LS-H-210                  | IMGHC-TX-H-210     |
| 230                  | 105              | 38                 | IMGHC-LS-H-230                  | IMGHC-TX-H-230     |
| 250                  | 109              | 39                 | IMGHC-LS-H-250                  | IMGHC-TX-H-250     |
| 270                  | 112              | 40                 | IMGHC-LS-H-270                  | IMGHC-TX-H-270     |
| 290                  | 115              | 41                 | IMGHC-LS-H-290                  | IMGHC-TX-H-290     |
| 310                  | 118              | 42                 | IMGHC-LS-H-310                  | IMGHC-TX-H-310     |
| 330                  | 121              | 43                 | IMGHC-LS-H-330                  | IMGHC-TX-H-330     |
| 350                  | 126              | 44                 | IMGHC-LS-H-350                  | IMGHC-TX-H-350     |
| 390                  | 128              | 45                 | IMGHC-LS-H-390                  | IMGHC-TX-H-390     |

### HIGH PROFILE : special volumes\*

|     |     |    |                |                |
|-----|-----|----|----------------|----------------|
| 430 | 135 | 46 | IMGHC-LS-H-430 | IMGHC-TX-H-430 |
| 470 | 142 | 47 | IMGHC-LS-H-470 | IMGHC-TX-H-470 |
| 510 | 146 | 48 | IMGHC-LS-H-510 | IMGHC-TX-H-510 |
| 570 | 151 | 49 | IMGHC-LS-H-570 | IMGHC-TX-H-570 |
| 620 | 157 | 50 | IMGHC-LS-H-620 | IMGHC-TX-H-620 |
| 680 | 160 | 51 | IMGHC-LS-H-680 | IMGHC-TX-H-680 |

(1) Only for some countries (export)

Ask for availability

Important : Single use implant - Must be checked before use

## Poly Implants Prothèses

337, avenue de Bruxelles - 83507 La Seyne-sur-Mer cedex - FRANCE - Tél. 33 (0)4 94 10 98 10 - Fax 33 (0)4 94 10 98 11 - Site web : [www.pipfrance.fr](http://www.pipfrance.fr) - E-mail : [pipfrance@wanadoo.fr](mailto:pipfrance@wanadoo.fr)  
Certifications normes ISO 9001 - EN 46001




L'implant pré-rempli de gel de silicone haute cohésivité donne jusqu'à ce jour les meilleurs résultats esthétiques, confort patiente et longévité implant.

Les différentes publications depuis 1987 montrent que l'enveloppe texturée de l'implant diminue très sensiblement le pourcentage de "capsules".

Stérilisation : oxyde d'éthylène

## Implant mammaire pré-rempli de gel haute cohésivité profil haut

(surface lisse ou texturée)

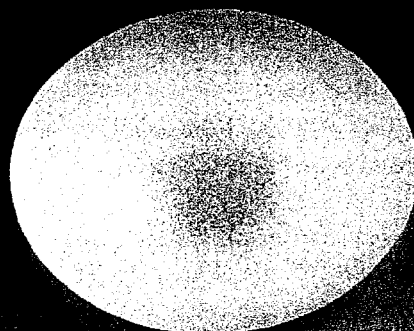

CE 0197

### PROFIL HAUT : volumes courants

| Volume total (cc) | Diamètre (mm) | Projection (mm) | Référence Lisse <sup>(1)</sup> | Référence Texturée |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 90                | 80            | 29              | IMGHC-LS-H-090                 | IMGHC-TX-H-090     |
| 130               | 84            | 32              | IMGHC-LS-H-130                 | IMGHC-TX-H-130     |
| 150               | 90            | 34              | IMGHC-LS-H-150                 | IMGHC-TX-H-150     |
| 170               | 94            | 35              | IMGHC-LS-H-170                 | IMGHC-TX-H-170     |
| 190               | 98            | 36              | IMGHC-LS-H-190                 | IMGHC-TX-H-190     |
| 210               | 102           | 37              | IMGHC-LS-H-210                 | IMGHC-TX-H-210     |
| 230               | 105           | 38              | IMGHC-LS-H-230                 | IMGHC-TX-H-230     |
| 250               | 109           | 39              | IMGHC-LS-H-250                 | IMGHC-TX-H-250     |
| 270               | 112           | 40              | IMGHC-LS-H-270                 | IMGHC-TX-H-270     |
| 290               | 115           | 41              | IMGHC-LS-H-290                 | IMGHC-TX-H-290     |
| 310               | 118           | 42              | IMGHC-LS-H-310                 | IMGHC-TX-H-310     |
| 330               | 121           | 43              | IMGHC-LS-H-330                 | IMGHC-TX-H-330     |
| 350               | 126           | 44              | IMGHC-LS-H-350                 | IMGHC-TX-H-350     |
| 390               | 128           | 45              | IMGHC-LS-H-390                 | IMGHC-TX-H-390     |

### PROFIL HAUT : volumes à la demande\*

|     |     |    |                |                |
|-----|-----|----|----------------|----------------|
| 430 | 135 | 46 | IMGHC-LS-H-430 | IMGHC-TX-H-430 |
| 470 | 142 | 47 | IMGHC-LS-H-470 | IMGHC-TX-H-470 |
| 510 | 146 | 48 | IMGHC-LS-H-510 | IMGHC-TX-H-510 |
| 570 | 151 | 49 | IMGHC-LS-H-570 | IMGHC-TX-H-570 |
| 620 | 157 | 50 | IMGHC-LS-H-620 | IMGHC-TX-H-620 |
| 680 | 160 | 51 | IMGHC-LS-H-680 | IMGHC-TX-H-680 |


(1) concerne uniquement certains pays (export)

\*interroger pour disponibilité

Important : l'implant à usage unique - Ne pas implanter "à sec"


**Poly Implants Prothèses**

337, avenue de Bruxelles - 83507 La Seyne-sur-Mer cedex - FRANCE - Tél. 33 (0)4 94 10 98 10 - Fax 33 (0)4 94 10 98 11 - Site web : [www.pipfrance.fr](http://www.pipfrance.fr) - E-mail : [pipfrance@wanadoo.fr](mailto:pipfrance@wanadoo.fr)  
Certifications normes ISO 9001 - EN 46001

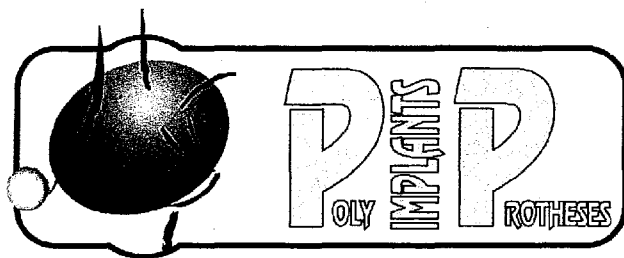

## Prefilled High cohesivity gel mammary implant standard profile

(smooth or textured)

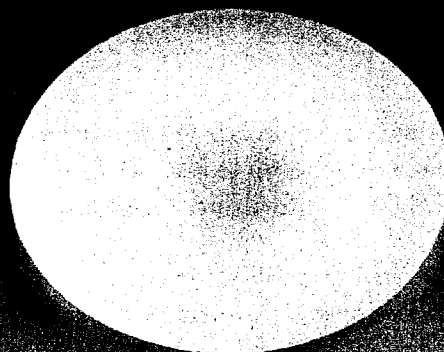

CE0197

The prefilled high cohesivity silicon gel implant gives up to now the best aesthetic results, patient comfort and implant longevity.

The various articles published since 1987 show that the texture of the implant reduces quite noticeably the "capsules" percentage.

Sterilization : ethylene oxyde

### STANDARD PROFILE : usual volumes

| Total volume<br>(cc) | Diameter<br>(mm) | Projection<br>(mm) | Smooth Reference <sup>(1)</sup> | Textured Reference |
|----------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| 85                   | 87               | 18                 | IMGHC-LS-S-085                  | IMGHC-TX-S-085     |
| 105                  | 92               | 20                 | IMGHC-LS-S-105                  | IMGHC-TX-S-105     |
| 125                  | 97               | 21                 | IMGHC-LS-S-125                  | IMGHC-TX-S-125     |
| 145                  | 102              | 23                 | IMGHC-LS-S-145                  | IMGHC-TX-S-145     |
| 165                  | 106              | 26                 | IMGHC-LS-S-165                  | IMGHC-TX-S-165     |
| 185                  | 108              | 27                 | IMGHC-LS-S-185                  | IMGHC-TX-S-185     |
| 205                  | 110              | 28                 | IMGHC-LS-S-205                  | IMGHC-TX-S-205     |
| 225                  | 114              | 29                 | IMGHC-LS-S-225                  | IMGHC-TX-S-225     |
| 245                  | 117              | 30                 | IMGHC-LS-S-245                  | IMGHC-TX-S-245     |
| 265                  | 124              | 31                 | IMGHC-LS-S-265                  | IMGHC-TX-S-265     |
| 285                  | 126              | 32                 | IMGHC-LS-S-285                  | IMGHC-TX-S-285     |
| 305                  | 128              | 33                 | IMGHC-LS-S-305                  | IMGHC-TX-S-305     |
| 325                  | 130              | 34                 | IMGHC-LS-S-325                  | IMGHC-TX-S-325     |
| 345                  | 132              | 35                 | IMGHC-LS-S-345                  | IMGHC-TX-S-345     |
| 365                  | 136              | 34                 | IMGHC-LS-S-365                  | IMGHC-TX-S-365     |

### STANDARD PROFILE : special volumes\*

|     |     |    |                |                |
|-----|-----|----|----------------|----------------|
| 415 | 141 | 35 | IMGHC-LS-S-415 | IMGHC-TX-S-415 |
| 455 | 145 | 36 | IMGHC-LS-S-455 | IMGHC-TX-S-455 |
| 505 | 150 | 37 | IMGHC-LS-S-505 | IMGHC-TX-S-505 |
| 555 | 156 | 38 | IMGHC-LS-S-555 | IMGHC-TX-S-555 |
| 605 | 160 | 39 | IMGHC-LS-S-605 | IMGHC-TX-S-605 |
| 655 | 166 | 40 | IMGHC-LS-S-655 | IMGHC-TX-S-655 |
| 705 | 172 | 41 | IMGHC-LS-S-705 | IMGHC-TX-S-705 |

(1) Only for some countries (export)

Ask for availability

Important : Single use implant - Must be rinsed before use

**Poly Implants Prothèses**

337, avenue de Bruxelles - 83507 La Seyne-sur-Mer cedex - France - Tél. 33 (0)4 94 10 98 10 - Fax 33 (0)4 94 10 98 11 - Site web : [www.pipfrance.fr](http://www.pipfrance.fr) - E-mail : [pipfrance@wanadoo.fr](mailto:pipfrance@wanadoo.fr)  
Certifications normes ISO 9001 - EN 46001




L'implant pré-rempli de gel de silicone haute cohésivité donne jusqu'à ce jour les meilleurs résultats esthétiques, confort patiente et longévité implant.

Les différentes publications depuis 1987 montrent que l'enveloppe texturée de l'implant diminue très sensiblement le pourcentage de "capsules".

Stérilisation : oxyde d'éthylène

**Implant mammaire pré-rempli  
de gel haute cohésivité  
profil standard**

(surface lisse ou texturée)

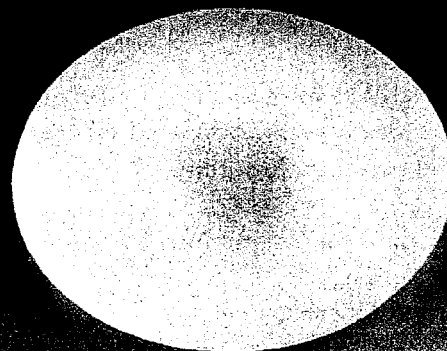

CE0197

### PROFIL STANDARD : volumes courants

| volume total<br>(cc) | diamètre<br>(mm) | projection<br>(mm) | Référence Lisse <sup>®</sup> | Référence Texturée |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 85                   | 87               | 18                 | IMGHC-LS-S-085               | IMGHC-TX-S-085     |
| 105                  | 92               | 20                 | IMGHC-LS-S-105               | IMGHC-TX-S-105     |
| 125                  | 97               | 21                 | IMGHC-LS-S-125               | IMGHC-TX-S-125     |
| 145                  | 102              | 23                 | IMGHC-LS-S-145               | IMGHC-TX-S-145     |
| 165                  | 106              | 26                 | IMGHC-LS-S-165               | IMGHC-TX-S-165     |
| 185                  | 108              | 27                 | IMGHC-LS-S-185               | IMGHC-TX-S-185     |
| 205                  | 110              | 28                 | IMGHC-LS-S-205               | IMGHC-TX-S-205     |
| 225                  | 114              | 29                 | IMGHC-LS-S-225               | IMGHC-TX-S-225     |
| 245                  | 117              | 30                 | IMGHC-LS-S-245               | IMGHC-TX-S-245     |
| 265                  | 124              | 31                 | IMGHC-LS-S-265               | IMGHC-TX-S-265     |
| 285                  | 126              | 32                 | IMGHC-LS-S-285               | IMGHC-TX-S-285     |
| 305                  | 128              | 33                 | IMGHC-LS-S-305               | IMGHC-TX-S-305     |
| 325                  | 130              | 34                 | IMGHC-LS-S-325               | IMGHC-TX-S-325     |
| 345                  | 132              | 35                 | IMGHC-LS-S-345               | IMGHC-TX-S-345     |
| 365                  | 136              | 34                 | IMGHC-LS-S-365               | IMGHC-TX-S-365     |

### PROFIL STANDARD : volumes à la demande\*

|     |     |    |                |                |
|-----|-----|----|----------------|----------------|
| 415 | 141 | 35 | IMGHC-LS-S-415 | IMGHC-TX-S-415 |
| 455 | 145 | 36 | IMGHC-LS-S-455 | IMGHC-TX-S-455 |
| 505 | 150 | 37 | IMGHC-LS-S-505 | IMGHC-TX-S-505 |
| 555 | 156 | 38 | IMGHC-LS-S-555 | IMGHC-TX-S-555 |
| 605 | 160 | 39 | IMGHC-LS-S-605 | IMGHC-TX-S-605 |
| 655 | 166 | 40 | IMGHC-LS-S-655 | IMGHC-TX-S-655 |
| 705 | 172 | 41 | IMGHC-LS-S-705 | IMGHC-TX-S-705 |

\* Les données sont indicatives et ne doivent pas être utilisées pour la planification chirurgicale.

\* Les données sont indicatives et ne doivent pas être utilisées pour la planification chirurgicale.

\* Les données sont indicatives et ne doivent pas être utilisées pour la planification chirurgicale.

**Poly Implants Prothèses**

337, avenue de Bruxelles - 83507 La Seyne-sur-Mer cedex - FRANCE - Tél. 33 (0)4 94 10 98 10 - Fax 33 (0)4 94 10 98 11 - Site web : [www.pipfrance.fr](http://www.pipfrance.fr) - E-mail : [pipfrance@wanadoo.fr](mailto:pipfrance@wanadoo.fr)  
Certifications normes ISO 9001 - EN 46001

## IMPLANTATION ADVICES :

1) Due to its design the asymmetrical implant should not be implanted in retro-pectoral. It can only be inserted in **retro-glandular**.

2) **Insertion :**

Depending on the patient, the prosthesis can be implanted :


- in submammary,
- in aerolar (peri-areolar, transareolar, ...).

3) Due to its design it is almost impossible for the asymmetrical implant to "rotate". (However, the patient must wear for 2 months the bra especially made for this implant – See our **FINESTYLE** contention garments range before choosing the bra).

In the same way, the detachment should be **1,5 to 3 cm** greater than the prosthesis dimensions and follow the prosthesis shape in so far as possible.

Don't hesitate to detach more and more by the interior side of the implant (by the sternum) and by the upper side. This will allow the best aesthetical results and a more natural breast shape.

By the submammary fold, adapt to the patient morphology as with round prosthesis.

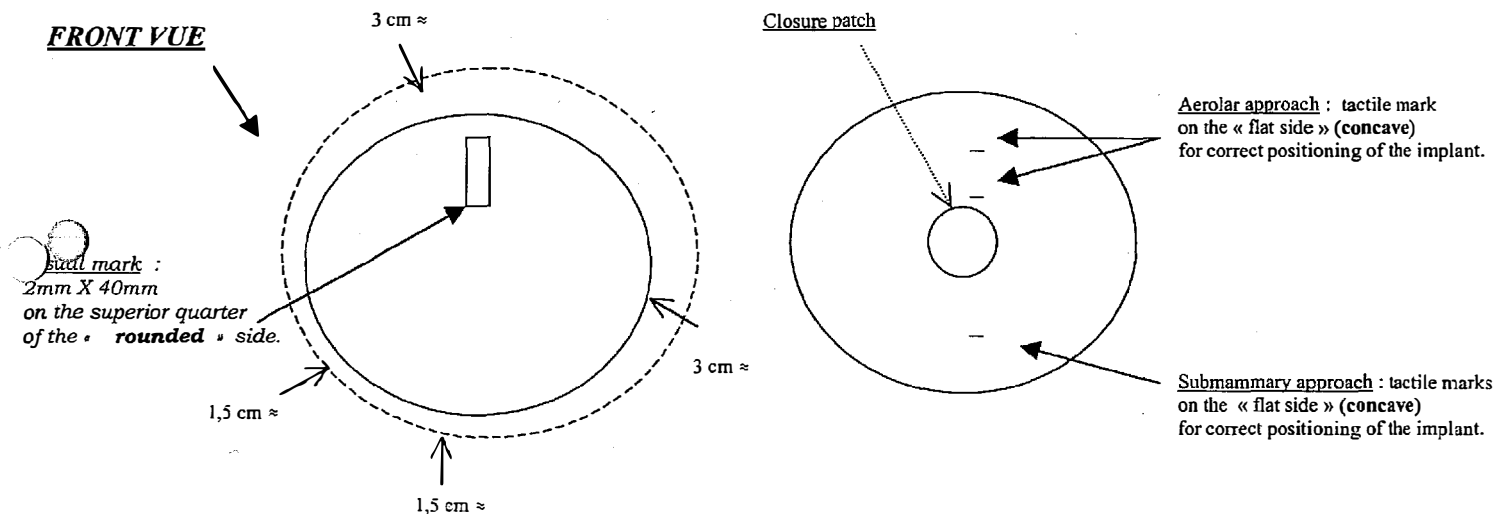

4) Prior to implantation, well identify the **left (AL)** prosthesis and the **right (AR)** prosthesis.

When implanting, assure of the well placement, either thanks to **tactile marks**, or using **visual marks** located on the top of the upper prosthesis part, which should be in the vertical line of the areola (see technical form).


**POLYIMPLANT PROTHESES**

337 Avenue de Bruxelles - 83507 LA SEYNE - Cedex - FRANCE

Tél. 04.94.10.98.10 - Fax. 04.94.10.98.11

S.A. au capital de 11.340.000 Francs - RCS TOULON B 382.473.254 - 91.B.640 - SIRET 382.473.254.00011 - NAF 331 B

CERTIFICATION NORMES EUROPÉENNES : ISO 9001 - EN 46001

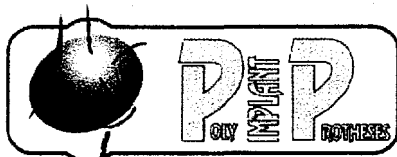

DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES STÉRILES

## CONSEJOS DE IMPLANTACIÓN :

1) Dado su concepción, la prótesis asimétrica no debe ser implantada en retro-pectoral. Solo debe ser implantada en **retro-glandular**.

2) **Vía de implantación :**

En función de la paciente, esta prótesis puede ser implantada de las maneras siguientes:


- por vía submamaria
- por vía areolar (peri-areolar, transareolar, ...).

3) Dado su concepción, el implante asimétrico tiene pocas posibilidades de « girar ». (Sin embargo, es imperativo que la paciente lleve durante 2 meses el sujetador especialmente concebido para eso – Ver nuestra línea de ropa de contención **FINESTYLE** antes de elegir el sujetador).

En el mismo sentido, el desprendimiento por todos lados de la prótesis debe ser **1,5 a 3 cm** superior a las dimensiones del implante y si es posible, seguir la forma de la prótesis.

No faltar desprender un poco más al nivel de la parte interior (cerca del sternum) y de la parte superior, para obtener los mejores resultados estéticos y tener una forma de senos más natural.

Cerca del pliegue submamario, adaptarse a la morfología de la paciente de la misma manera que con los implantes redondos.

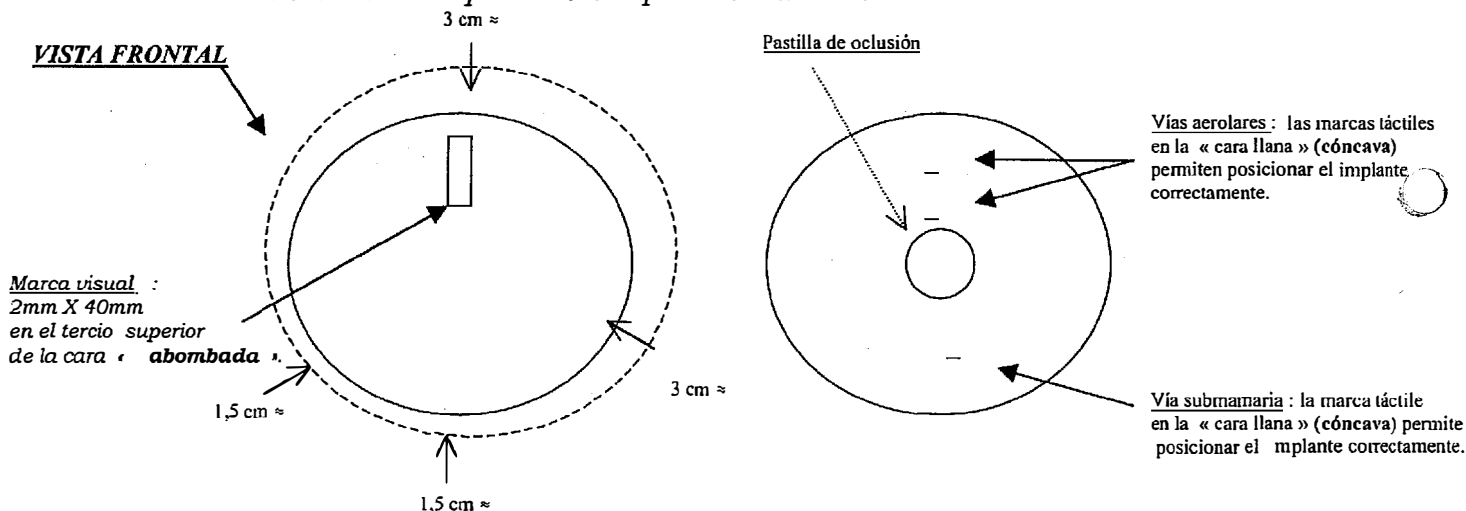

4) Antes de la implantación, bien identificar el implante **derecho (AR)** y el implante **izquierdo (AL)**.

Durante la intervención, asegurarse de la buena posición de las prótesis, sea con las **marcas táctiles**, o gracias a la **marca visual**. Esta marca se encuentra arriba de la parte superior del implante, y normalmente debe encontrarse en la alineación vertical de la areola (ver la ficha técnica).

POLY IMPLANT PROTHESES

337 Avenue de Bruxelles - 83507 LA SEYNE - Cedex - FRANCE

Tél. 04.94.10.98.10 - Fax. 04.94.10.98.11

S.A. au capital de 11 340.000 Francs - RCS TOULON B 382.473.254 - 91.B.640 - SIRET 382.473.254.00011 - NAF 331 B

CERTIFICATION NORMES EUROPÉENNES : ISO 9001 - EN 46001



# ASYMMETRICAL BREAST IMPLANTS

**New Concept**

Asymétrical prostheses

Physiological prostheses

**Only subglandular**

Right implant

Left implant

Open sight at 20%

Right implant

Left implant

"Flat side": **Concave** on the vertical and horizontal plan allowing the implant to perfectly adapt itself to the thorax shape. Also limiting the possibility of rotation.

Visual mark:

2mm X 40mm on the superior quarter of the "rounded" side.

Right implant

Left implant

Closure patch.

Acrolar approach: Tactile marks on the "flat side" (**concave**) for correct positioning of the implant.

Submammary approach: tactile mark on the "flat side" (**concave**) for correct positioning of the implant.

External quadrant: Its shape favours the use of larger volume implants while keeping the correct glandular coverage.

Right implant

Left implant

Internal quadrant: Its shape favours using implants with higher projection while keeping correct aesthetical (+ physiological) results.

The highest projected part of the implant is located under the areola and not in the middle of the implant.

Traditional prosthesis.


**POLY IMPLANTS PROTHÈSES**

337, Avenue de Bruxelles

83507 La Seyne-sur-Mer - Cedex - France - Tél: 33 (0)4.94.10.98.10 - Fax: 33 (0)4.94.10.98.11

e.mail: [pipfrance@compuserve.com](mailto:pipfrance@compuserve.com) et/ou: [pipfrance@pipfrance.fr](mailto:pipfrance@pipfrance.fr)

CE 0197

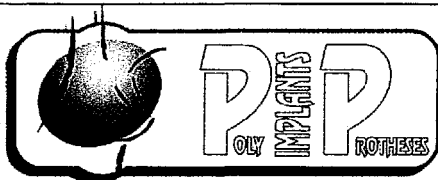

ASYMMETRICAL PROFILE  
PRE-FILLED HIGH COHESIVITY GEL  
BREAST IMPLANTS

| VOLUME<br>(cc) | WIDTH<br>(mm) | HEIGHT<br>(mm) | PROJECTION<br>(mm) |
|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| 200            | 109           | 86             | 36                 |
| 230            | 114           | 89             | 39                 |
| 245            | 119           | 93             | 42                 |
| 260            | 125           | 98             | 44                 |
| 280            | 130           | 102            | 46                 |
| 300            | 135           | 107            | 48                 |
| 330            | 138           | 110            | 50                 |
| 370            | 143           | 115            | 52                 |
| 400            | 148           | 119            | 54                 |
| 450            | 153           | 124            | 56                 |

No contractual document - Conception: Francis BEAUMONT/04.42.61.83.52 - Tirage: Imprimerie Bandol.

POLY IMPLANTS PROTHÈSES  
337, Avenue de Bruxelles

83507 La Seyne-sur-Mer - Cedex - France - Tél: 33 (0)4.94.10.98.10 - Fax: 33 (0)4.94.10.98.11  
e.mail: pipfrance@compuserve.com et/ou: pipfrance@pipfrance.fr

CE 0197

## ANATOMICAL PROSTHESIS

### RECONSTRUCTION

### AESTHETIC

CE 0197

**Aerolar Incision:** Tactile marks on the "flat side" for correct positioning of the implant.


Closure patch

**Nammary incision:**


The tactile mark on the "flat side" allows the good positioning of the implant.

Open sight at 20°

Right profile sight

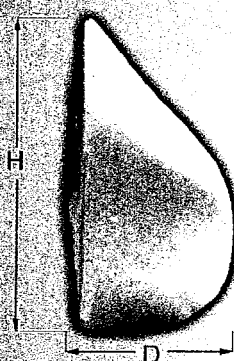

Frontal sight (Rounded side).

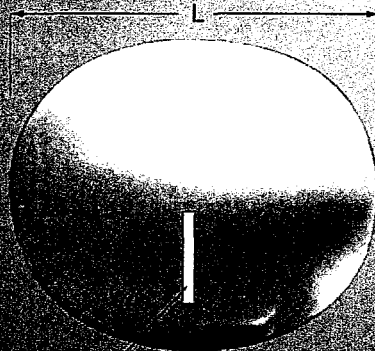

**Visual marks:**

2mm x 40mm on the lower third of the "rounded" side.

### HIGH COHESIVITY GEL PRE-FILLED BREAST IMPLANT IMGHC-TX-R

| VOLUME<br>(cc) | LENGTH<br>(mm) | HEIGHT<br>(mm) | Maximum<br>projection<br>(mm) | Textured<br>Reference |
|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 180 cc         | 111            | 96             | 39                            | IMGHC-TX-R-180        |
| 220 cc         | 113            | 98             | 41                            | IMGHC-TX-R-220        |
| 260 cc         | 120            | 98             | 44                            | IMGHC-TX-R-260        |
| 330 cc         | 127            | 111            | 48                            | IMGHC-TX-R-330        |
| 420 cc         | 132            | 118            | 53                            | IMGHC-TX-R-420        |
| 500 cc         | 143            | 124            | 57                            | IMGHC-TX-R-500        |
| 600 cc         | 154            | 137            | 60                            | IMGHC-TX-R-600        |

## LA PRÓTESIS ANATÓMICA


### RECONSTRUCCIÓN

### ESTÉTICA

CE 0197

**Via areolar:** Las marcas fáciles en la "carallana" permiten posicionar el implante correctamente.


Pastilla de oclusión

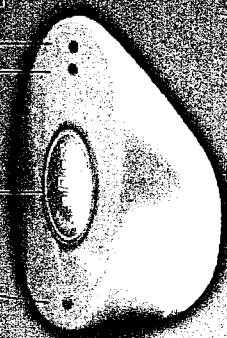


**Via submamaria:** La marca táctil en la "carallana" permite posicionar el implante correctamente.

Vista abierta 20°

Vista perfil derecho

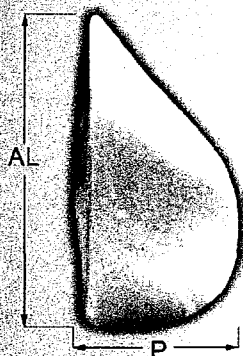

Vista frontal (cara abombada):

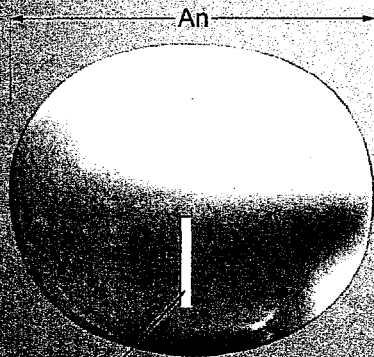

**Marcavisual:**

2mm x 40mm en el tercer o interior de la cara "abombada".

### IMPLANTE MAMARIO PRE-RELLENO DE GEL ALTA COHESIVIDAD IMGHC-TX-R

| VOLUMEN<br>(cc) | ANCHURA<br>(mm) | ALTURA<br>(mm) | Proyección<br>maximal<br>(mm) | Referencia<br>texturizados |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 180 cc          | 111             | 96             | 39                            | IMGHC-TX-R-180             |
| 220 cc          | 113             | 98             | 41                            | IMGHC-TX-R-220             |
| 260 cc          | 120             | 98             | 44                            | IMGHC-TX-R-260             |
| 330 cc          | 127             | 111            | 48                            | IMGHC-TX-R-330             |
| 420 cc          | 132             | 118            | 53                            | IMGHC-TX-R-420             |
| 500 cc          | 143             | 124            | 57                            | IMGHC-TX-R-500             |
| 600 cc          | 154             | 137            | 60                            | IMGHC-TX-R-600             |